




Quick Start Guide Blue2™

www.ablenetinc.com
1-800-322-0956

PN 98000035 (08/13 Rev. A)

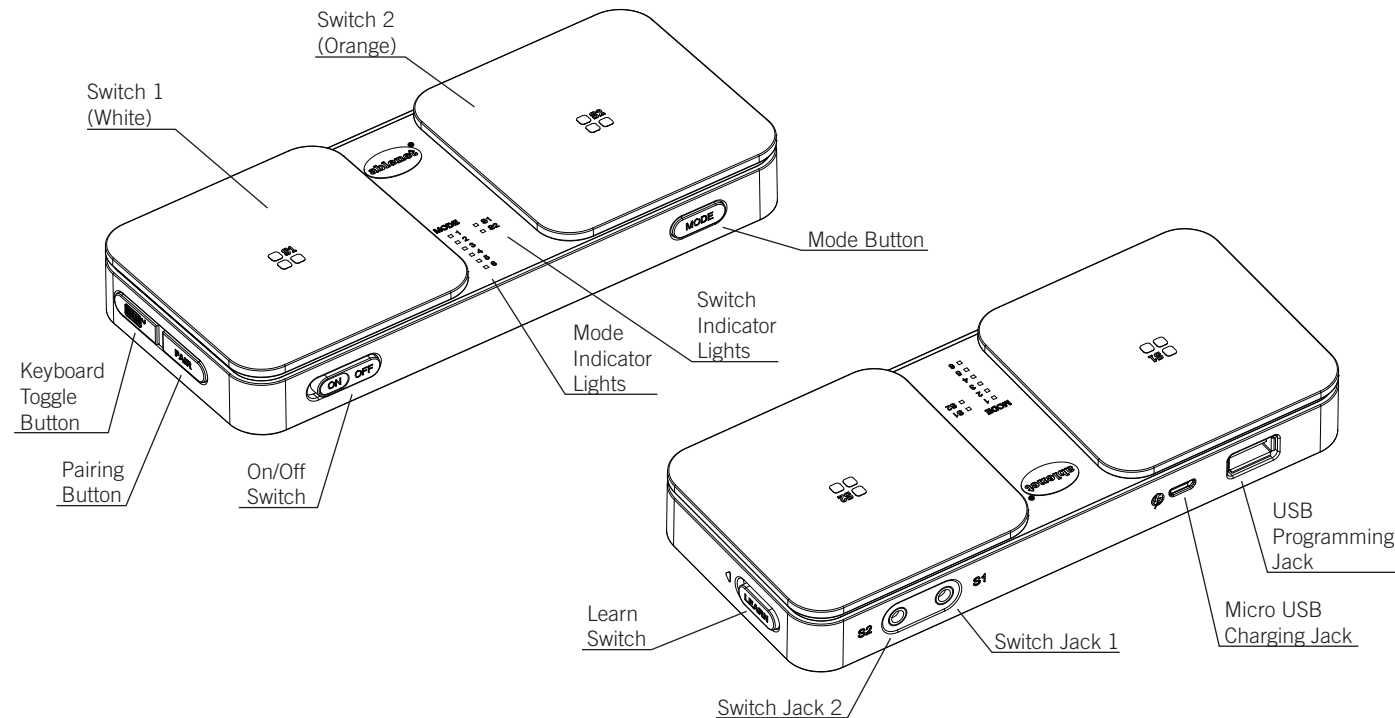

Battery Charging

Blue2 is powered by an internal rechargeable battery. Charge Blue2 to full power before using.

To charge:

1. Select appropriate wall adapter for your region.
2. Insert micro USB portion of wall charger into the micro USB charging jack on Blue2 and plug wall adapter into wall outlet.
3. While charging the switch indicator lights S1 and S2 will blink on and off. When fully charged the switch indicator lights will remain lit.

Setup

1. Turn Blue2 on using the on/off switch.
2. Activate the pairing button on Blue2.
3. In your devices Bluetooth® settings select BLUE2.
4. Activate the mode button on Blue2 to select a mode.
5. Set up any settings for switch access within the app you will be using on your device.
6. Blue2 is now ready for use with your device and app.

Note: If your app does not work with a mode, try another mode. If neither Mode 1, 2, or 3 work, contact your app developer to determine the keystrokes being used and then create a custom mode to accommodate your app.

Switch Use

Once setup, activate Switch 1 (white switch top) or Switch 2 (orange switch top) to use with an app.

If you would like to use one or two external switches with Blue2, insert the 3.5mm switch plug of the external switch into switch jack S1 or switch jack S2. The external switch will now control the app on your device.

Use Modes

Blue2 is preprogrammed with three modes of operation to accommodate the standard protocols used for switch access to apps. In addition, a user can program their own custom sequence of keystrokes to modes 4, 5, and 6.

- Mode 1: Space and Enter
- Mode 2: 1 and 3
- Mode 3: ~1 and ~3
- Mode 4: User defined
- Mode 5: User defined
- Mode 6: User defined

Sleep Mode

After 30-minutes of inactivity, Blue2 will go into sleep mode. To wake from sleep mode, activate Switch 1 (white switch top) or Switch 2 (orange switch top) and wait approximately 7-seconds for Blue2 to re-pair with your device.

On-screen Keyboard

If using an iOS device with Blue2, activating the keyboard toggle button on Blue2 will bring up the on-screen keyboard. To hide the on-screen keyboard activate the keyboard toggle button a second time.

Custom Modes

Blue2 allows you to record custom key sequences to create a custom mode.

1. Turn Blue2 on using the on/off switch.
2. Plug a USB keyboard into the USB programming jack.
3. Turn the learn switch to on by moving it to the left.
4. Select Mode 4, 5, or 6.
5. Activate Switch 1 to start recording mode. The S1 light will blink while in recording mode.
6. Activate up to four keystrokes that you would like recorded to Switch 1 on the USB keyboard.
7. Activate Switch 1 to stop recording mode.
8. Activate Switch 2 to start recording mode. The S2 light will blink while in recording mode.
9. Activate up to four keystrokes that you would like recorded to Switch 2 on the USB keyboard.
10. Activate Switch 2 to stop recording mode.
11. Turn the learn switch to off by moving it to the right.
12. Remove USB keyboard.
13. Select your new mode to use.

Pairing With A New Device

If Blue2 has already been paired with a device, you must first unpair it from the original device before it can be paired with a new device. To unpair, go into your devices Bluetooth settings, find the device named BLUE2, and choose to Forget This Device. You can now follow the Blue2 setup procedure to pair with the new device.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Consult AbleNet Technical Support or your local Distributor for help.

Additional Information

Visit www.ablenetinc.com for mounting options.


AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text, along with return/repair information is available at www.ablenetinc.com.

For more information on AbleNet products and services, contact:
AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113
1-800-322-0956
www.ablenetinc.com



Guide de mise en route rapide Blue2™

www.ablenetinc.com
1-800-322-0956

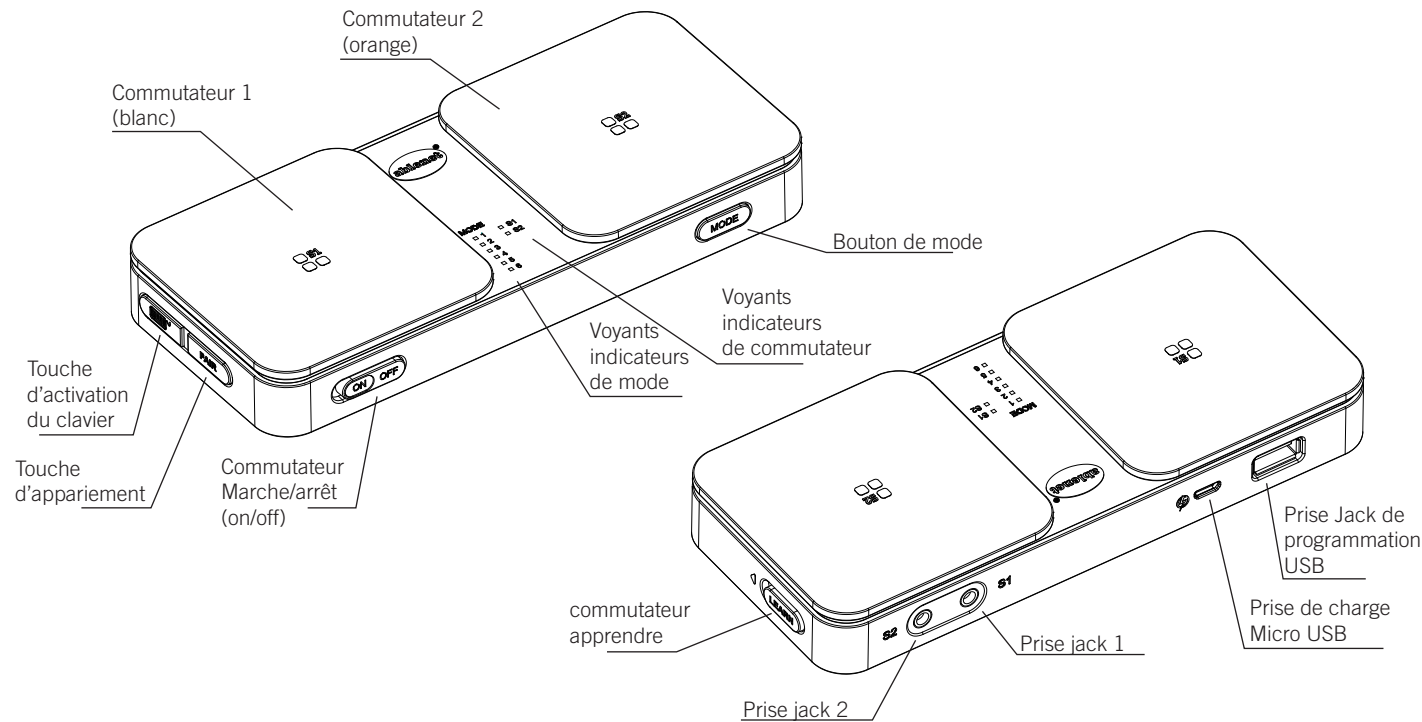

PN 98000035 (08/13 Rev. A)

Chargement de la batterie

Blue2 est alimenté par une batterie interne rechargeable. Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser Blue2.

Pour le charger :

1. Sélectionnez l'adaptateur mural approprié pour votre région.
2. Insérez la prise USB du chargeur dans le port micro USB de chargement sur le Blue2 et branchez l'adaptateur mural sur une prise murale.
3. Pendant le chargement, les voyants témoins S1 et S2 du commutateur clignotent. La charge finie, les témoins du commutateur restent allumés.

Configuration

1. Mettez Blue2 en marche via l'interrupteur d'alimentation on/off (marche/arrêt).
2. Actionnez le bouton d'appariement sur le Blue2.
3. Parmi les paramètres Bluetooth® sélectionnez BLUE2.
4. Actionnez le bouton mode sur le Blue2 afin d'en sélectionner un.
5. Réglez tous les paramètres afférents à l'accès au commutateur dans l'application que vous utiliserez sur le périphérique.
6. Blue2 est désormais prêt à être utilisé avec votre périphérique et votre application.

Remarque : Si votre application ne fonctionne pas avec un mode, essayez-en un autre. Si aucun des modes 1, 2 ou 3 ne fonctionne, contactez le concepteur de votre application afin de déterminer quelles frappes ont été utilisées, puis créez un mode personnalisé afin de l'adapter à votre application.

Utilisation du commutateur

Une fois réglé, actionnez le Commutateur 1 (commutateur blanc en haut) ou le Commutateur 2 (commutateur orange en haut) à utiliser avec une application.

Si vous désirez utiliser un ou deux commutateurs externes avec le Blue2, insérez la fiche de 3,5 mm du commutateur externe dans la prise jack S1 ou prise jack S2. Le commutateur externe contrôlera alors l'application sur votre périphérique.

Modes d'utilisation

Blue2 est préprogrammé avec trois modes de fonctionnement afin de s'adapter aux protocoles standards utilisés pour l'accès d'un commutateur aux applications. De plus, l'utilisateur peut programmer ses propres séquences de frappe personnalisées sur les modes 4, 5 et 6.

- Mode 1 : Espace et entrée
- Mode 2 : 1 et 3
- Mode 3 : ~1 et ~3
- Mode 4 : Définit par l'utilisateur
- Mode 5 : Définit par l'utilisateur
- Mode 6 : Définit par l'utilisateur

Mode Veille

Après 30 minutes d'inactivité, le Blue2 passe en mode veille. Pour le réactiver depuis le mode veille, actionnez le Commutateur 1 (commutateur blanc en haut) ou le Commutateur 2 (commutateur orange en haut) et patientez pendant environ 7 secondes afin que le Blue2 se ré-apparie avec votre périphérique.

Clavier à l'écran

Si vous utilisez un périphérique iOS avec le Blue2, actionnez le bouton d'activation du clavier sur le Blue2 affichera le clavier à l'écran. Pour cacher le clavier à l'écran, actionnez le bouton d'activation du clavier une deuxième fois.

Modes personnalisés

Blue2 vous permet d'enregistrer des séquences clés personnalisées afin de créer un mode personnalisé.

1. Mettez Blue2 en marche via l'interrupteur d'alimentation on/off (marche/arrêt).
2. Insérez un clavier USB à la prise de programmation USB.
3. Placez le commutateur apprendre sur marche en le bougeant vers la gauche.
4. Sélectionnez le mode 4, 5 ou 6
5. Activez le commutateur 1 pour démarrer le mode d'enregistrement. Le voyant S1 clignote pendant l'enregistrement.
6. Effectuez jusqu'à quatre frappes sur le clavier USB que vous voulez enregistrer sur le Commutateur 1.
7. Activez le Commutateur 1 pour arrêter le mode d'enregistrement.
8. Activez le Commutateur 2 pour démarrer le mode d'enregistrement. Le voyant S2 clignote pendant l'enregistrement.
9. Effectuez jusqu'à quatre frappes sur le clavier USB que vous voulez enregistrer sur le Commutateur 2.
10. Activez le Commutateur 2 pour arrêter le mode d'enregistrement.
11. Placez le commutateur apprendre sur arrêt en le bougeant vers la droite.
12. Retirez le clavier USB.
13. Sélectionnez votre nouveau mode afin de l'utiliser.

Appariement avec un nouveau périphérique

Si Blue2 a déjà été apparié avec un périphérique, vous devez tout d'abord le désappairer du périphérique avant que celui-ci ne puisse être apparié à nouveau avec un nouveau périphérique. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres Bluetooth de vos périphériques, identifiez le périphérique nommé BLUE2, et choisissez d'oublier de périphérique. Vous pouvez désormais suivre la procédure de réglage du Blue2 afin de l'appairer avec le nouveau périphérique.

Remarque : Cet appareil a été testé et a été jugé conforme aux limites imposées pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites ont été fixées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut transmettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension), il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de supprimer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- éloignez davantage l'équipement du récepteur ;
- consultez le service d'assistance technique d'AbleNet ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

Informations supplémentaires

Pour les options de fixation, allez sur le site www.ablenetinc.com.

Les produits AbleNet sont assortis d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie protège contre les défauts de matériel et les vices de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat. La garantie en version texte complète texte et toutes les informations sur les réparations et les retours sont disponibles à www.ablenetinc.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et services d'AbleNet, contactez :

AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113

1-800-322-0956


www.ablenetinc.com



ablenet®

Kurzanleitung Blue2™

www.ablenetinc.com
+1-800-322-0956

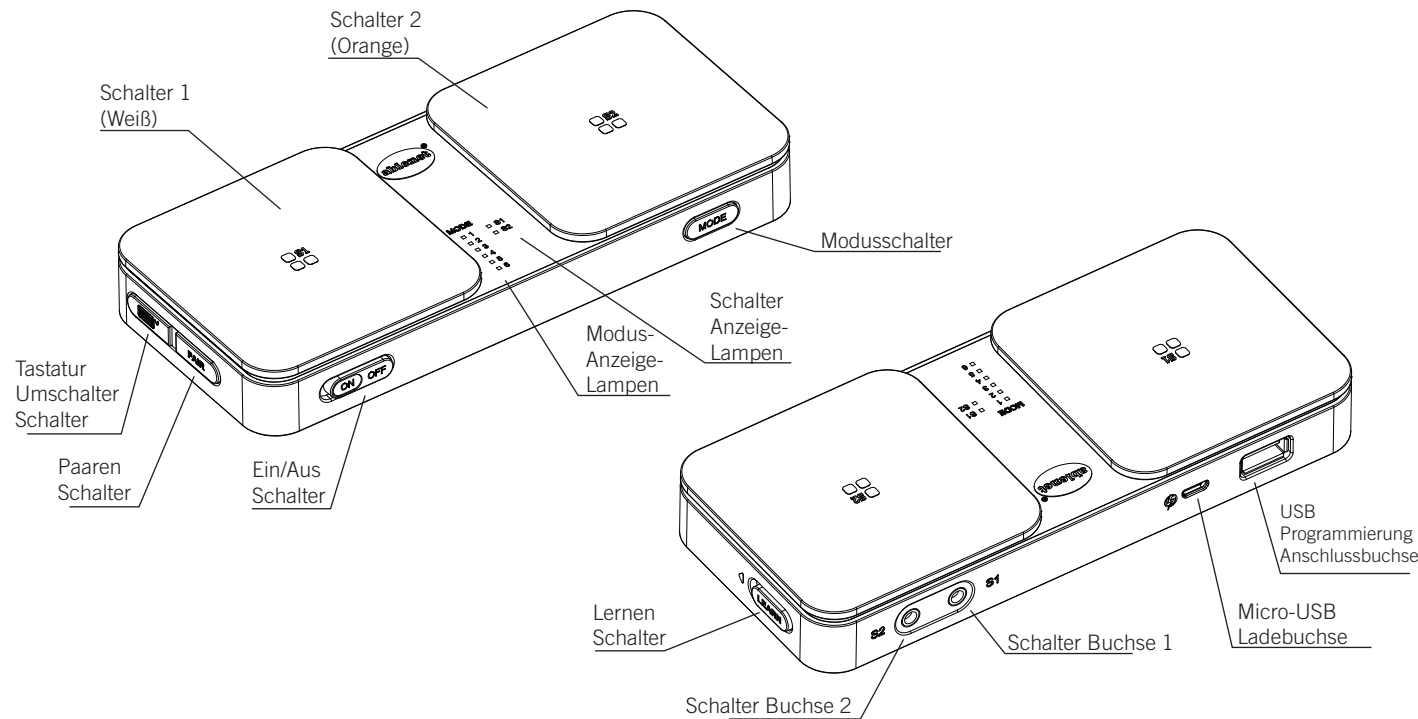

PN 98000035 (08/13 Rev. A)

Laden der Batterie

Blue2 verfügt über eine Stromversorgung über eine interne aufladbare Batterie. Laden Sie Blue2 vor der Verwendung vollständig auf.

Zum Laden:

1. Wählen Sie den entsprechenden Adapter für Ihre Region.
2. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Wandladegeräts in den Akku-Ladeanschluss an Blue2 ein und den anderen Stecker an einer Wandsteckdose.
3. Die Schalter-Anzeigelampen S1 und S2 blinken während des gesamten Ladevorgangs. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten die Anzeigelampen kontinuierlich.

Einstellung

1. Schalten Sie Blue2 am Ein-/Ausschalter ein.
2. Aktivieren Sie den Schalter zum Paaren an Blue2.
3. Wählen Sie BLUE2 in den Bluetooth-® Einstellungen Ihres Geräts.
4. Aktivieren Sie den Modusschalter am Blue2, um einen Modus zu wählen.
5. Führen Sie sämtliche Einstellungen für den Schalter-Zugriff innerhalb der App, die Sie auf Ihrem Gerät verwenden werden, durch.
6. Blue2 ist kann nun mit Ihrem Gerät und Ihrer App verwendet werden.

Hinweis: Wenn Ihre App mit einem der Modi nicht funktioniert, probieren Sie es mit einem anderen Modus. Wenn keiner der Modi 1,2 oder 3 funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Entwickler der App, lassen Sie sich von ihm die verwendete Tastenfolge mitteilen und erstellen Sie anschließend Ihre eigene benutzerdefinierte Tastenfolge.

Verwendung der Schalter

Aktivieren Sie nach der Einstellung Schalter 1 (weiße Schalteroberfläche) oder Schalter 2 (orange Schalteroberfläche) für die Verwendung mit einer App.

Wenn Sie einen oder zwei externe Schalter mit Blue2 verwenden wollen, setzen Sie den 3,5 mm Schalterstecker in Schalterbuchse S1 oder Schalterbuchse S2 ein. Der externe Schalter wird nun die App auf Ihrem Gerät steuern.

Verwendung der Modi

Zur Anpassung an die Standard-Protokolle, die für Schalter-Zugriff auf Apps verwendet werden, ist Blue2 mit drei Betriebsmodi vorprogrammiert. Zusätzlich können benutzerdefinierte Tastenfolgen auf die Modi 4, 5 und 6 programmiert werden.

- Modus 1 Leerzeichen und Enter
- Modus 2 1 und 3
- Modus 3 ~1 und ~3
- Modus 4 Benutzerdefiniert
- Modus 5 Benutzerdefiniert
- Modus 6 Benutzerdefiniert

Schlafmodus

Wenn Blue2 länger als 30 Minuten nicht verwendet wird, schaltet sich automatisch der Schlafmodus ein. Um Blue2 aus dem Schlafmodus heraus wieder einzuschalten, aktivieren Sie Schalter 1 (weiße Schalteroberfläche) oder Schalter 2 (orange Schalteroberfläche) und warten Sie ungefähr 7 Sekunden, bis Blue2 sich erneut mit Ihrem Gerät gepaart hat.

Bildschirmtastatur

Wenn Sie ein iOS Gerät mit Blue2 verwenden, können Sie durch Betätigen des Tastatur-Umschalters am Blue2 eine Bildschirmtastatur aktivieren. Zum Ausblenden der Bildschirmtastatur drücken Sie den Tastatur-Umschalter eine Sekunde lang.

Benutzerdefinierte Modi

Mit Blue2 können Sie benutzerdefinierte Tastenfolgen aufzeichnen, um einen benutzerdefinierten Modus zu erstellen.

1. Schalten Sie Blue2 am Ein-/Ausschalter ein.
2. Stecken Sie eine USB-Tastatur an der USB-Programmierungs-Buchse ein.
3. Setzen Sie den Lernschalter auf Ein, indem Sie ihn nach links schieben.
4. Wählen Sie Modus 4, 5 oder 6
5. Aktivieren Sie Schalter 1, um den Aufzeichnungsmodus zu starten. Die Lampe S1 wird blinken, während sich das Gerät im Aufzeichnungsmodus befindet.
6. Aktivieren Sie an der USB-Tastatur bis zu vier Tastenanschläge, die Sie für Schalter 1 aufzeichnen wollen.
7. Aktivieren Sie Schalter 1, um den Aufzeichnungsmodus zu beenden.
8. Aktivieren Sie Schalter 2, um den Aufzeichnungsmodus zu starten. Die Lampe S2 wird blinken, während sich das Gerät im Aufzeichnungsmodus befindet.
9. Aktivieren Sie an der USB-Tastatur bis zu vier Tastenanschläge, die Sie für Schalter 2 aufzeichnen wollen.
10. Aktivieren Sie Schalter 2, um den Aufzeichnungsmodus zu beenden.
11. Setzen Sie den Lernschalter auf Aus, indem Sie ihn nach rechts schieben.
12. Stecken Sie die USB-Tastatur aus.
13. Wählen Sie Ihren neuen Modus zur Verwendung.

Mit einem neuen Gerät paaren

Wenn Blue2 bereits mit einem Gerät gepaart wurde, müssen Sie diese Paarung zuerst trennen, bevor Sie Blue2 mit einem neuen Gerät paaren können. Um eine bestehende Paarung zu trennen, öffnen Sie die Einstellungen Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie das Gerät mit dem Namen BLUE2 und wählen Sie „Diese Verbindung trennen“. Nun können Sie Blue2 gemäß dem Einstellungsverfahren mit dem neuen Gerät paaren.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und befindet sich gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen innerhalb der Grenzen für ein Digitalgerät der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen dazu, in Wohngebieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen sicherzustellen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann Hochfrequenzstrahlen abgeben. Wenn das Gerät nicht anleitungsgemäß installiert oder verwendet wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keine Garantie dafür übernommen, dass in einer bestimmten Installation keine Störung auftritt. Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was durch ein Ein- und Ausschalten des Gerätes bestätigt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Vom AbleNet Technical Support oder von einem lokalen Distributor beraten lassen.

Weitere Informationen

Montageoptionen finden Sie auf www.ablenetinc.com.


Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine zweijährige Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Den vollständigen Garantietext können Sie zusammen mit Informationen zu Rückgabe und Reparatur auf www.ablenetinc.com einsehen.

Mehr Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von AbleNet erhalten Sie von
AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113
+1-800-322-0956
www.ablenetinc.com



Guía de inicio rápido Blue2™

www.ablenetinc.com
1-800-322-0956

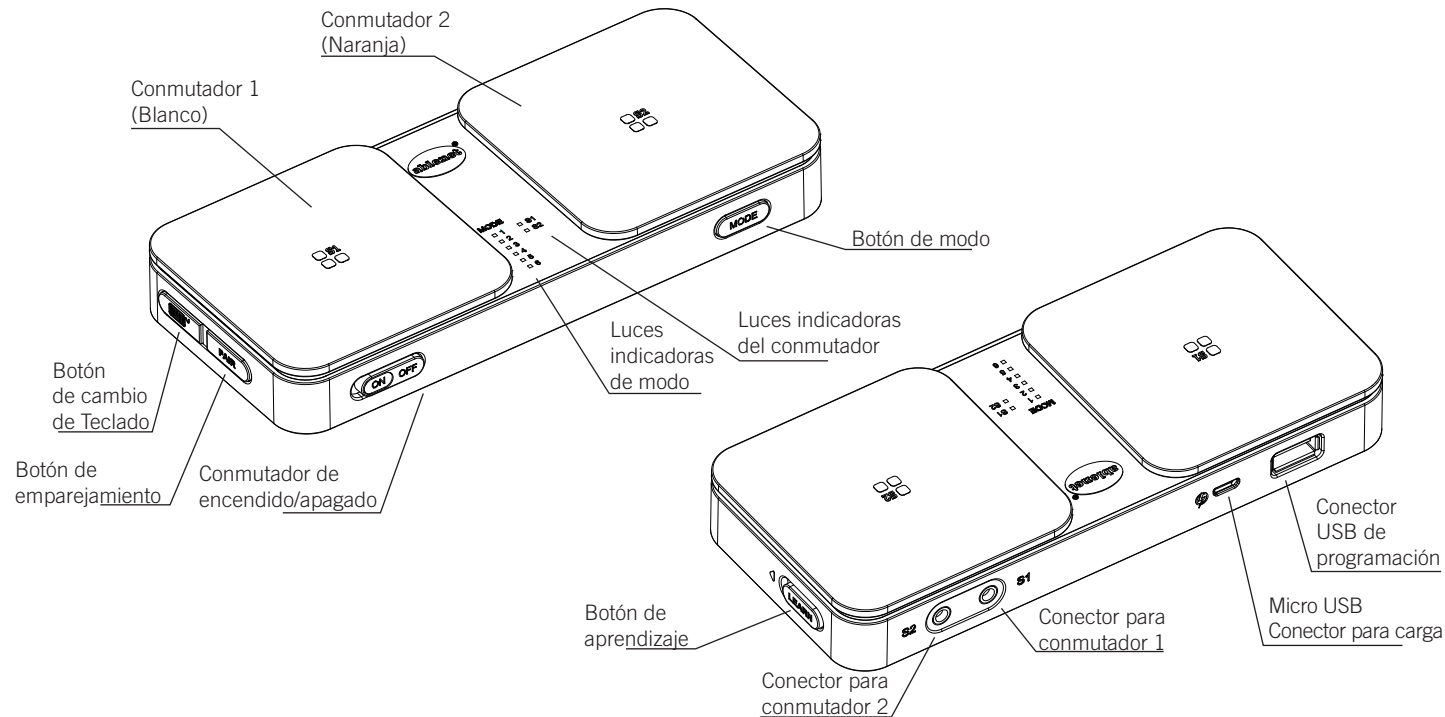

PN 98000035 (08/13 Rev. A)

Cambio de la batería

Blue2 está alimentado por una batería interna recargable. Cargue la batería de Blue2 por completo antes de usar el dispositivo.

Para cargarla:

1. Seleccione el adaptador de pared correspondiente a su región.
2. Inserte la porción del micro USB de un adaptador de pared al conector de carga del micro USB del Blue2 y enchufe el adaptador de pared a la toma de corriente de la pared.
3. Durante la carga, las luces indicadoras de los conmutadores 1 y 2 parpadearán. Cuando la carga se haya completado, las luces indicadoras del conmutador permanecerán encendidas.

Configuración

1. Encienda Blue2 con el conmutador de encendido/apagado.
2. Active el botón de emparejar de Blue2.
3. En el menú de sus dispositivos Bluetooth® seleccione BLUE2.
4. Active el botón de modo de Blue2 para elegir una modalidad.
5. Configure cualquier menú para acceso por conmutación dentro de la aplicación que utilizará en su dispositivo.
6. Blue2 está listo para usarlo con su dispositivo y aplicación.

Nota: Si su aplicación no funciona con un modo, pruebe con otro. Si no funcionan los modos 1, 2 o 3, contáctese con el desarrollador de su aplicación para determinar las pulsaciones utilizadas y crear una modalidad a medida para ubicar su aplicación.

Uso del conmutador

Una vez configurado, active el Conmutador 1 (conmutador superior blanco) o Conmutador 2 (conmutador superior naranja) para usarlo con una aplicación.

Si desea utilizar uno o dos conmutadores externos con Blue2, inserte el enchufe del conmutador de 3,5 mm del conmutador externo en un conector para conmutador 1 o en un conector para conmutador 2. El conmutador externo controlará la aplicación en su dispositivo.

Uso de modalidades

Blue2 está preprogramado con tres modalidades de operación para ubicar los protocolos estándar utilizados para acceder a los conmutadores desde aplicaciones. Además, un usuario puede programar su propia secuencia de pulsaciones a los modos 4, 5 y 6.

- Modo 1: Barra espaciadora y Enter
- Modo 2: 1 y 3
- Modo 3: ~1 y ~3
- Modo 4: Usuario definido
- Modo 5: Usuario definido
- Modo 6: Usuario definido

Modo de espera

Después de 30 minutos de inactividad, Blue2 ingresará en modo de espera. Para salir del modo de espera, active el Conmutador 1 (parte superior del conmutador blanca) o el Conmutador 2 (parte superior del conmutador naranja) y espere aproximadamente 7 segundos para que Blue2 se vuelva a emparejar con su dispositivo.

Teclado en pantalla

Si utiliza un dispositivo iOS con Blue2 y el botón de cambio de teclado en Blue2, aparecerá el teclado en pantalla. Para ocultar el teclado en pantalla, active el botón de cambio de teclado por segunda vez.

Modalidades personalizadas

Blue2 le permite grabar secuencias de claves personalizadas para crear una modalidad personalizada.

1. Encienda Blue2 con el conmutador de encendido/apagado.
2. Enchufe un teclado USB al conector USB de programación.
3. Active el botón de aprendizaje moviéndolo a la izquierda.
4. Seleccione el modo 4, 5 o 6.
5. Active el Conmutador 1 para iniciar el modo grabación. La luz del C1 parpadeará mientras esté activado el modo grabación.
6. Active hasta cuatro pulsaciones que le gustaría grabar en el Conmutador 1 en el teclado USB.
7. Active el Conmutador 1 para detener el modo grabación.
8. Active el Conmutador 2 para iniciar el modo grabación. La luz del C2 parpadeará mientras esté activado el modo grabación.
9. Active hasta cuatro pulsaciones que le gustaría grabar en el Conmutador 2 en el teclado USB.
10. Active el Conmutador 2 para detener el modo grabación.
11. Active el botón de aprendizaje moviéndolo a la derecha.
12. Retire el teclado USB.
13. Seleccione el nuevo modo que utilizará.

Emparejar un nuevo dispositivo

Si Blue2 ya fue emparejado con un dispositivo, primero deberá desemparejarlo del dispositivo original antes de poder emparejarlo con el dispositivo nuevo. Para desemparejar, vaya a la configuración de su dispositivo Bluetooth, busque el dispositivo denominado BLUE2 y marque la opción Forget This Device (Olivar este dispositivo). Siga el procedimiento de configuración de Blue2 para el emparejamiento con un dispositivo nuevo.

Nota: Este equipo ha sido revisado y se ha determinado que cumple con los límites referentes a los dispositivos digitales de clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar un grado razonable de protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Asimismo, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte con el servicio técnico de AbleNet o con su distribuidor local para recibir ayuda.

Información adicional

Visite www.ablenetinc.com para obtener opciones de montaje.

Los productos fabricados por AbleNet tienen una garantía limitada de dos años. Esta garantía los cubre contra defectos de materiales y fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. El texto completo de la garantía, junto con la información sobre devoluciones y reparaciones está disponible en www.ablenetinc.com.

Para obtener información adicional sobre los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:
AbleNet, Inc. 2625 Patton Road, Roseville, MN 55113
1-800-322-0956
www.ablenetinc.com